



Nipplie Speen

Voor een meer natuurlijke voeding



LIFE STARTS WITH US

Een moment van genegenheid, troost en verbinding dat 6 tot 8 keer per dag wordt herhaald, is de maaltijd, die uiterst belangrijk is voor een ideale ontwikkeling van de kleine gevoelige patiënten die onze pasgeborenen zijn.

We moeten deze bijzondere momenten zoveel mogelijk behouden, zelfs wanneer borstvoeding niet mogelijk is. Het is dan ook één van de prioriteiten voor ouders en ziekenhuispersoneel om de melk op een veilige en hygiënische manier toe te dienen aan de pasgeborene baby.



Vergemakkelijk de natuurlijke tongbeweging van uw baby tijdens flesvoeding met de **Nipplie-spenen van Beldico**

De spenen van Beldico zijn medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor de orale toediening van moedermelk, gereconstitueerde melk of andere soorten vloeibare voeding, met of zonder toevoeging van medicatie of voedingsstoffen, aan premature of kwetsbare zuigelingen in een medische omgeving die aangepaste voeding nodig hebben.

De spenen van Beldico worden vervaardigd in een clean room en vervolgens gesteriliseerd door middel van ETO of gedesinfecteerd met gammastralen. Zo wordt het risico op de ontwikkeling van externe ziektekiemen beperkt en blijft het natuurlijke evenwicht van de moedermelk behouden.

Beldico ontwikkelde de **Nipplie** speen, een speen die de vorm van een deel van de moederborst benadert, om het zuigen aan de fles te vergemakkelijken en een vlottere overgang tussen borstvoeding en flesvoeding mogelijk te maken. Bovendien voldoet dit aan bepaalde behoeften op de afdeling **neonatologie, materniteit en pediatrie**.

Aangepast aan de ziekenhuispraktijken

- **PRAKTISCH** : De reeds gesteriliseerde of bacteriologisch schone Nipplie speen, met universele schroefdraad, is klaar voor gebruik.
- **HYGIËNISCH** : De dop zorgt voor de fysieke en aseptische bescherming van de speen tot deze wordt aangeboden aan het kind.
- **ANTI-LEKKAGE** : De flexibiliteit van de speen, zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de ring en zijn grote terugloop onder de ring zorgen voor een perfecte afsluiting wanneer de speen op de fles is gemonteerd.



2 verschillende snelheden herkenbaar aan de kleur van hun ring

Ontworpen voor een meer natuurlijke voeding

De vorm en het materiaal van de **Nipplie** speen werden zorgvuldig geselecteerd door het R&D-team van Beldico op basis van het advies van ervaringsdeskundigen. Bijgevolg hebben we de **Nipplie** speen zoveel mogelijk aangepast aan de fysiologie van borstvoeding.


🍃 Het juiste evenwicht tussen Flexibiliteit en Hardheid

De **Nipplie** speen is **flexibel en rekt uit in de mond** tijdens het voeden; op die manier positioneert de speen zich correct in de mond en wordt de peristaltische beweging van de tong en het overbrengen van de melk naar de slokdarm vergemakkelijkt.

De hardheid van de **Nipplie** speen zorgt voor een comfortabel, ononderbroken voedingsmoment.

🍃 Uniek ontwerp

De **Nipplie** speen combineert een **brede basis** met een **anatomische vorm** om het kind te helpen de natuurlijke zuigbeweging van borstvoeding na te bootsen, waardoor het risico van tepel-speenverwarring vermindert.

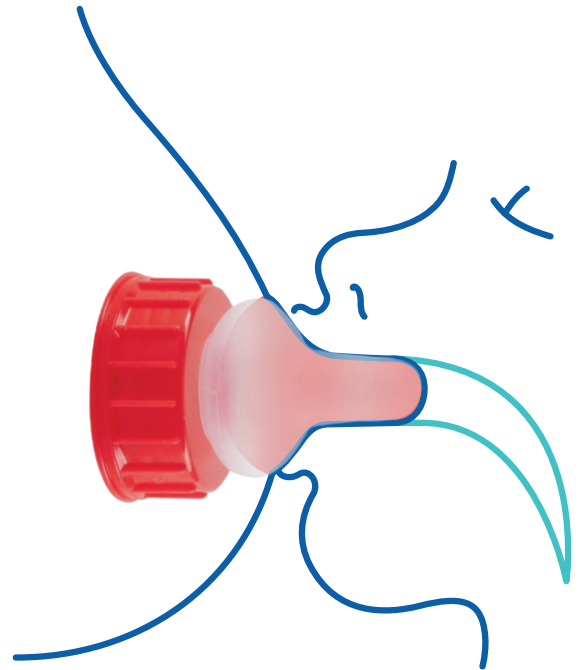

Veilige voedingsnelheid dankzij microscopische gaatjes met versteviging tegen scheurtjes

Materiaal is **zacht, niet klevend, smaak- en geurloos**. Dicht bij het gevoel van de natuurlijke borst

Extra zachte speen met rond uiteinde dat **zich aanpast aan de meeste babymondjes**, inclusief baby's die moeite hebben met zuigen

3 aanpasbare niveaus van het melkdebiet om de juiste hoeveelheid melk door te laten, afhankelijk van de behoeften van het kind

Brede, borstvormige basis voor betere ondersteuning van het kind wat **de baby aanmoedigt om zijn mond te openen***.

Voor de 3V-speen

- 🍃 Langzaam debiet
- 🍃🍃 Gemiddeld debiet
- 🍃🍃🍃 Hoog debiet




0% BPA, BPS, Phtalates, Latex

*In vergelijking met een conventionele speen met smalle basis

Standaardkenmerken

Benaming	Nipplie speen voor eenmalig gebruik
Materialen	Speen : Thermoplastisch elastomeer (TPE) Ring : Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE) Dop : Polypropyleen (PP) Gegarandeerd latexvrij, ftalaatvrij, BPA-vrij, BPS-vrij Recycleerbare materialen, die kunnen worden verwijderd overeenkomstig de geldende procedures voor het beheer van ziekenhuisafval
Type van de behandeling	Sterilisatie NAS 10 ⁻⁶ door ETO of desinfectie NAS 10 ⁻² door middel van gammastralen
Europese richtlijnen 93/42/EEG	Medisch hulpmiddel klasse IIa

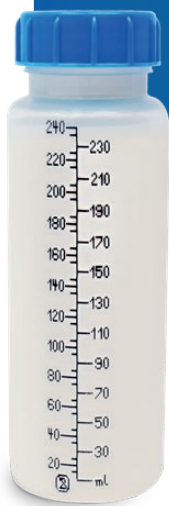

240mL



130mL



80mL



50mL



De **Nipplie** spenen 1V en 3V kunnen worden aangepast aan het volledige gamma flessen van Beldico met universele schroefdraad, klaar voor gebruik en voor eenmalig gebruik.

40mL voor colostrum

De zuigelingenfles voor colostrum heeft een afgeronde bodem, zodat verzorgers elke druppel van de kostbare eerste melk kunnen opvangen.

Beldico ontwerpt, produceert en commercialiseert medische hulpmiddelen voor babyvoeding en richt zich specifiek op de behoeften van pasgeborenen en premature baby's.

Flessen – borstkolven - spenen - fopspenen
Kolven en bewerken van moedermelk
Opwarmen van moedermelk of flesvoeding

Fabrikant

BELDICO
Rue André Feher 3
BE-6900 Marche-en-Famenne
BELGIË
Tel : 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be

Verdelers

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS N.V.
Marcel Broodthaersplein 8/5
BE-1060 Brussel
BELGIË
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

BELDICO B.V.
Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda
NEDERLAND
Tel : 0031 (0) 765 244 663
www.beldico.nl